


Collecteur d'aiguilles

1C

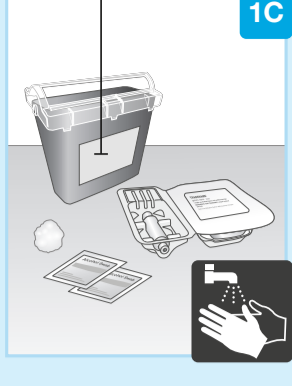


Rassemblez tout le matériel et lavez-vous les mains
Posez le matériel sur une surface plane et propre :

- barquette en plastique contenant 1 injecteur corporel et 1 cartouche
- 2 compresses d'alcool (non incluses dans la boîte)
- 1 boule de coton ou 1 compresse de gaze (non incluse dans la boîte)
- un collecteur de déchets spécifique à l'élimination des aiguilles (non inclus dans la boîte)

Lavez-vous les mains et séchez-les.


1D

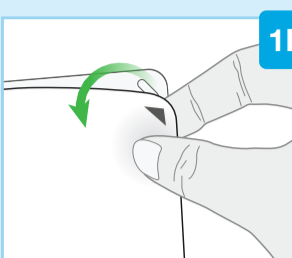

Retirez l'opercule en papier blanc de la barquette

- Localisez la flèche noire.
- Retirez l'opercule en papier blanc de la barquette.


1E

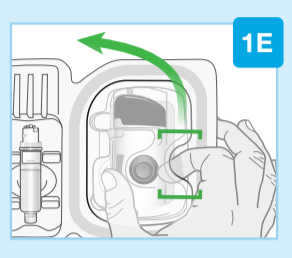

Soulevez le couvercle en plastique

- Localisez l'ouverture ronde sur le couvercle supérieur.
- Insérez l'index dans l'ouverture et placez le pouce sur la face opposée.
- Soulevez le couvercle pour le retirer et placez-le de côté.

1F

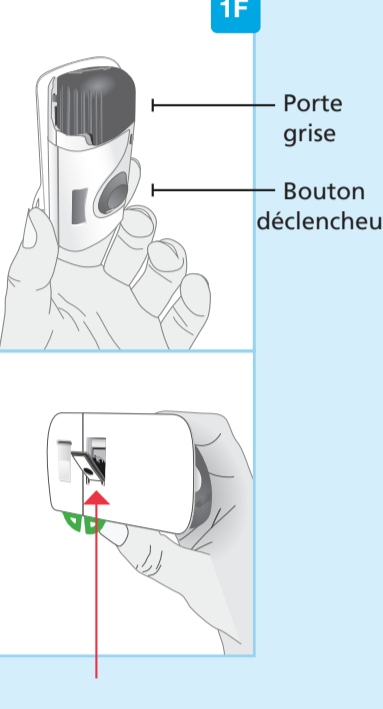

Examinez l'injecteur corporel


- Vérifiez que l'injecteur corporel est intact et n'est pas endommagé.
- La porte grise doit être légèrement ouverte.
- Si la porte grise ne s'ouvre pas, appuyez fermement sur les nervures (côté gauche de la porte) et faites pivoter la porte pour l'ouvrir.
- **Ne pas fermer la porte grise** avant que la cartouche soit chargée.
- **Ne pas utiliser l'injecteur corporel** s'il est tombé, si des pièces manquent ou s'il est endommagé.
- **Ne pas toucher le bouton déclencheur gris** avant d'être prêt à procéder à l'injection. Il n'est possible d'appuyer sur le bouton qu'une seule fois.
- **Ne pas toucher la zone du protégé-aiguille** ou l'aiguille.

Si vous appuyez sur le bouton déclencheur gris avant d'avoir placé l'injecteur sur votre corps, celui-ci ne pourra plus être utilisé. Dans ce cas, adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

Aiguille à l'intérieur (sous le protégé-aiguille)

ÉTAPE 2 - Préparation de l'injecteur corporel

2A

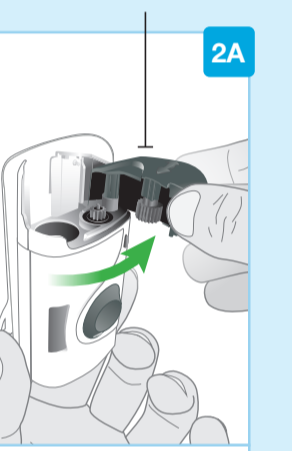

Ouvrez complètement la porte grise

- Évitez de toucher la zone du protégé-aiguille à l'arrière de l'injecteur corporel. L'aiguille est derrière le protégé-aiguille.
- Faites pivoter la porte grise à fond vers la droite pour l'ouvrir.
- Si la porte grise ne s'ouvre pas, appuyez fermement sur les nervures (côté gauche de la porte) et faites pivoter la porte pour l'ouvrir.
- **Ne pas fermer la porte grise** avant que la cartouche soit chargée.

Placez l'injecteur corporel de côté.


Aiguille à l'intérieur (sous le protégé-aiguille)

Porte grise

Vue arrière

Protégé-aiguille

2B

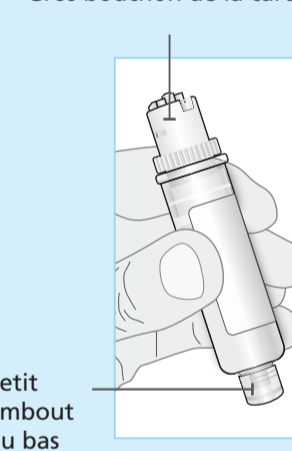

Examinez la cartouche

Sortez avec précaution la cartouche de la barquette en plastique.

- **Ne pas tourner** ou retirer le bouchon de la cartouche.


Contrôlez la cartouche

- La solution doit avoir un aspect incolore à jaune et peut contenir de minuscules particules blanches ou transparentes. Il est normal d'apercevoir quelques bulles.
- **Ne pas utiliser** si la solution est trouble ou contient des flocons ou de grosses particules.
- Vérifiez que les pièces de la cartouche et le plastique transparent ne sont pas fissurés ou brisés.
- **Ne pas utiliser** si la solution a été congelée (même si elle a été décongelée par la suite).
- **Ne pas utiliser la cartouche** si elle est tombée, si des pièces manquent ou si elle est endommagée.

Gros bouchon de la cartouche

Petit embout du bas

2C

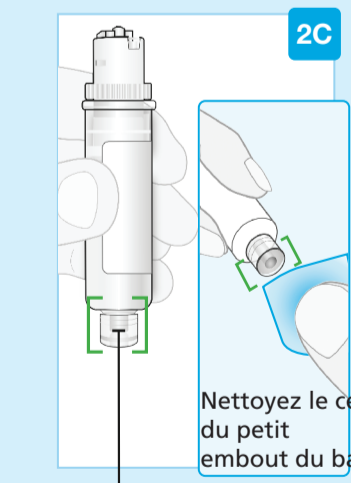


Nettoyez le petit embout du bas de la cartouche

- Localisez le petit embout du bas de la cartouche.
- Nettoyez-le avec une compresse imprégnée d'alcool. Veillez à nettoyer le centre du petit embout du bas de la cartouche.
- **Ne pas toucher le petit embout du bas** de la cartouche après l'avoir nettoyé.

Nettoyez le centre du petit embout du bas.

Petit embout du bas

2D

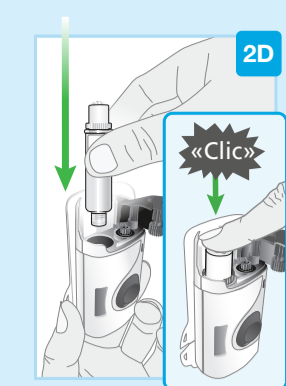


Insérez la cartouche verticalement.

Chargez la cartouche nettoyée dans l'injecteur corporel

- **Ne pas tourner** ou retirer le bouchon de la cartouche.
- Insérez d'abord le petit embout du bas de la cartouche dans l'injecteur corporel.
- Appuyez fermement sur la cartouche jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
- Après avoir chargé la cartouche, vous pourrez voir quelques gouttes de médicament à l'arrière de l'injecteur corporel. Ceci est normal.

Veillez à passer immédiatement à l'étape suivante. Si vous attendez, la solution séchera.

2E




Fermez la porte grise

Faites pivoter la porte grise vers la gauche, puis appuyez fermement et attendez le dé clic indiquant que la porte est fermée.

- La porte grise doit rester verrouillée après le chargement de la cartouche.
- **Ne pas fermer la porte grise** si la cartouche n'est pas complètement insérée ou n'est pas présente.
- Passez immédiatement à l'étape suivante.

ÉTAPE 3 - Préparation de l'injection

3A

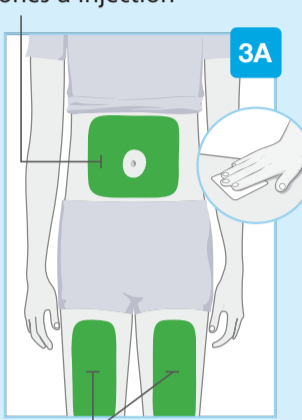

Choisissez le site d'injection et nettoyez-le

Choisissez l'une des trois zones d'injection suivantes :

- sur le dessus de la cuisse gauche
- sur le dessus de la cuisse droite
- ventre (abdomen), à au moins 5 cm du nombril


Ne pas injecter dans une zone de peau présentant naturellement un pli ou un renflement car l'auto-injecteur pourrait se détacher et tomber.

Avant l'injection, nettoyez le site d'injection en faisant un mouvement circulaire avec une compresse imprégnée d'alcool.

- **Ne pas toucher le site d'injection** ou souffler dessus après l'avoir nettoyé. Laisser sécher la peau avant de placer l'injecteur corporel dessus.
- **Ne pas injecter le médicament** à travers des vêtements.
- **Ne pas injecter le médicament** là où la peau est sensible ou présente un hématome, une rougeur, un durcissement, une cicatrice, des vergetures, un grain de beauté ou une pilosité excessive. Vous pouvez raser les poils sur le site d'injection.

Zones d'injection

3B

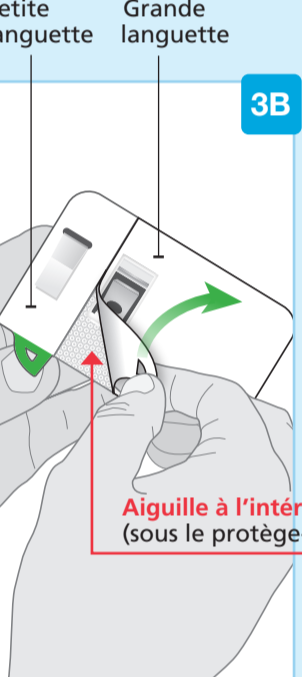

Détachez les deux languettes pour mettre à nu la couche adhésive.

Retournez l'injecteur corporel pour trouver les deux languettes vertes.

- Évitez de toucher le protégé-aiguille (l'aiguille est à l'intérieur).

Détachez la grande languette verte pour mettre à nu la couche adhésive.

Détachez la petite languette verte pour mettre à nu la couche adhésive. La bande en plastique transparent sera retirée et l'injecteur corporel sera activé.

- Vérifiez l'indicateur de statut lorsque l'injecteur corporel émet des bips.
- L'indicateur de statut clignotera en bleu lorsque l'injecteur corporel sera activé.
- Si l'indicateur de statut ne clignote pas en bleu, adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.
- **Ne pas encore appuyer** sur le bouton déclencheur gris.
- **Ne pas toucher le protégé-aiguille** ou l'aiguille.
- **Ne pas retirer l'adhésif** présent sur l'injecteur corporel ni laisser la face adhésive se replier et se coller.

Injecteur activé
Indicateur de statut clignotant en bleu

L'injecteur corporel de Skyrizi doit être placé sur la peau et l'injection doit débuter dans les 30 minutes suivant le retrait des languettes vertes ; sinon, le dispositif ne fonctionnera pas. Veillez à passer immédiatement à l'étape suivante.


Si l'indicateur de statut clignote en rouge, cela signifie que l'injecteur corporel ne fonctionne pas correctement. Ne continuez pas à l'utiliser. Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère pour obtenir de l'aide. Si l'injecteur corporel est fixé sur votre peau, retirez-le délicatement.

Petite languette

Grande languette

Aiguille à l'intérieur (sous le protégé-aiguille)

3C



Préparez la pose de l'injecteur corporel

- Pour le ventre (abdomen), tirez la peau et tenez-la de façon à créer une surface ferme et plate pour l'injection, à au moins 5 cm du nombril. Veillez à être assis(e) avec le dos droit pour éviter la formation de plis et de renflements.
- Il n'est pas nécessaire de tirer la peau pour l'aplatir pour les injections sur le dessus de la cuisse gauche ou droite.

Veillez à placer l'injecteur corporel de façon à voir l'indicateur de statut bleu.


Injecteur activé

Placez l'injecteur corporel sur votre peau

- Lorsque la lumière bleue clignote, l'injecteur corporel est prêt. Placez l'injecteur corporel sur la peau nettoyée avec l'indicateur de statut visible.
- **Ne pas placer l'injecteur corporel sur les vêtements.** Il ne doit être placé que sur la peau nue.
- Faites glisser un doigt sur l'adhésif pour bien le fixer.
- **Ne pas déplacer ni ajuster l'injecteur corporel** après qu'il a été placé sur la peau.

Passez immédiatement à l'étape suivante.

3D

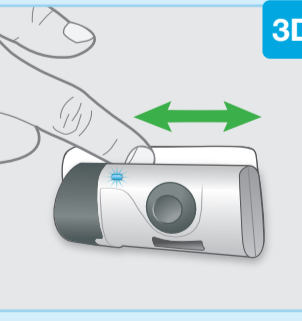


Placez l'injecteur corporel sur votre peau

- Lorsque la lumière bleue clignote, l'injecteur corporel est prêt. Placez l'injecteur corporel sur la peau nettoyée avec l'indicateur de statut visible.
- **Ne pas placer l'injecteur corporel sur les vêtements.** Il ne doit être placé que sur la peau nue.
- Faites glisser un doigt sur l'adhésif pour bien le fixer.
- **Ne pas déplacer ni ajuster l'injecteur corporel** après qu'il a été placé sur la peau.

Passez immédiatement à l'étape suivante.

ÉTAPE 4 - Injection de Skyrizi

4A

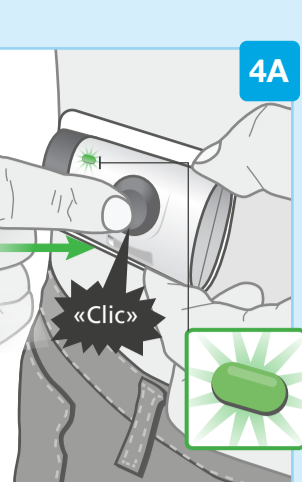


Déclenchez l'injection

Appuyez fermement sur le bouton déclencheur gris et relâchez-le.

- Vous entendrez un « clic » et vous pourrez ressentir une piqûre d'aiguille.
- Vérifiez l'indicateur de statut lorsque l'injecteur corporel émet des bips.
- Après le début de l'injection, l'indicateur de statut clignotera en vert en continu.
- Une fois l'injection commencée, vous entendrez un son de pompage au fur et à mesure que l'injecteur corporel délivre le médicament.

Ne pas continuer à utiliser l'injecteur corporel si l'indicateur de statut clignote en rouge. Dans ce cas, retirez délicatement l'injecteur corporel et adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

4B

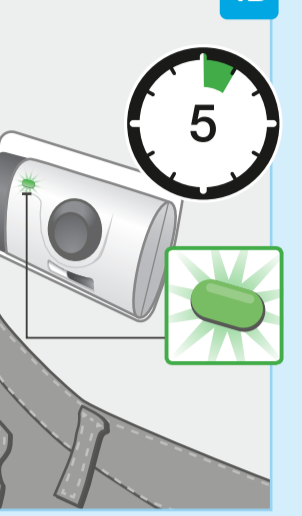


Attendez la fin de l'injection

- L'injection de la pleine dose du médicament peut prendre jusqu'à 5 minutes. L'injecteur corporel s'arrêtera automatiquement lorsque l'injection sera terminée.
- Pendant l'injection, l'indicateur de statut continuera à clignoter en vert.
- Vous entendrez un son de pompage au fur et à mesure que l'injecteur corporel continue à délivrer le médicament.
- Une activité physique modérée, par exemple marcher, tendre la main ou se pencher, est possible pendant l'injection.

Ne pas continuer à utiliser l'injecteur corporel si l'indicateur de statut clignote en rouge. Dans ce cas, retirez délicatement l'injecteur corporel et adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.


4C

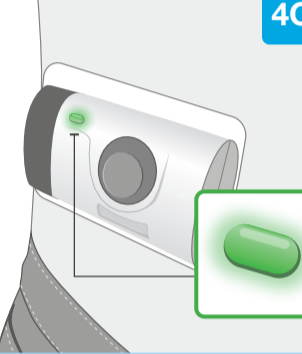

L'injection est terminée lorsque

- L'injecteur corporel s'arrête automatiquement.
- Vous entendez un bip et l'indicateur de statut passe au vert fixe. Si l'indicateur de statut est passé au vert fixe, cela signifie que l'injection est terminée.

4D

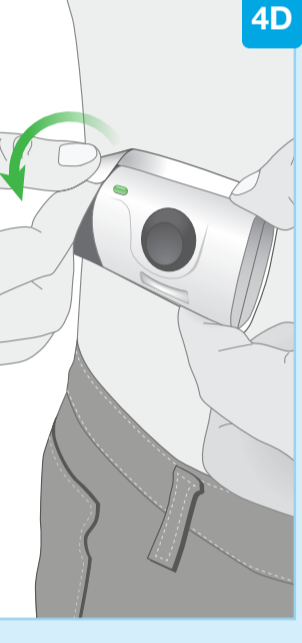


Retirez l'injecteur corporel

- **Ne pas placer les doigts** sur la face arrière de l'injecteur corporel pour le détacher de la peau.
- Lorsque l'injection est terminée, retirez délicatement l'injecteur corporel en tenant l'adhésif par le coin.
- Évitez de toucher le protégé-aiguille ou l'aiguille à l'arrière de l'injecteur corporel.
- Après avoir retiré l'injecteur corporel, vous entendrez plusieurs bips et l'indicateur de statut s'éteindra.
- Le protégé-aiguille recouvrira l'aiguille pendant le retrait de l'injecteur corporel.
- Il est normal de voir quelques gouttes de solution sur la peau après le retrait de l'injecteur corporel.
- Maintenez une boule de coton ou une compresse de gaze appuyée à l'endroit de l'injection pendant 10 secondes.
- **Ne pas frotter le site d'injection.**
- Un léger saignement au site d'injection est normal.

Passez à l'étape suivante.

ÉTAPE 5 - Fin du processus

5A

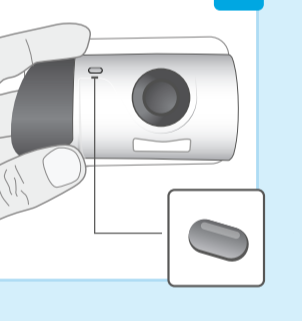


Contrôlez l'injecteur corporel

Examinez la fenêtre de visualisation du médicament et l'indicateur de statut.

Vérifiez que le piston blanc remplit toute la fenêtre de visualisation du médicament et que la lumière verte fixe s'éteint, ce qui vous indique que tout le médicament a été injecté.

- Si le piston blanc ne remplit pas toute la fenêtre, adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

5B

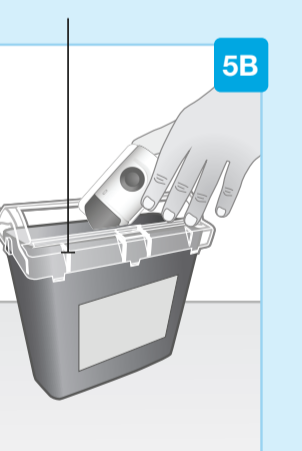

Collecteur d'aiguilles

Jetiez l'injecteur corporel usagé dans un collecteur spécifique à l'élimination des aiguilles immédiatement après utilisation.

- L'injecteur corporel contient des piles, des composants électroniques et une aiguille.
- Laissez la cartouche dans l'injecteur corporel.
- **Ne pas jeter l'injecteur corporel usagé avec les ordures ménagères.**
- Votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère vous indiquera comment restituer le collecteur, une fois ce dernier rempli. Il peut exister des directives locales pour l'élimination.



Colors:	Black	Cyan	Magenta	Yellow	PMS Red 032 C
	PMS 7724 C	PMS 144 C	Die		

abbvie	File Upload Date: 01 Sep 2024 09:35 UTC	Version Number: 5	Artwork is created at 100%
Brief ID: PR02-2024-00121	New Control Number: 20087365	PDS: PDS.5.03C654	
Size or Drawing Number: SB-7757 (Flat: 762 x 381 mm; Folded: 127 x 127 mm)			LAGN Drawing: N/A
Braille Code: N/A	Packaging Barcode Type: Datamatrix	Packaging Barcode Number: 20087365	
Variable Data Required: No			
Comments: Total pages: 2 Drop dieline, swatches and artwork before processing. Vendor allowed to add printer marks, as necessary.			